


Accuhaler®

- | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Obrir l'inhalador amb el dit polze (<i>clic</i>) | 3 Abaixar la palanca per carregar la dosi (<i>clic</i>) | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inspirar fort i profundament | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tancar la carcassa | 10 Glopejar aigua |


Aerolizer®

- | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Retirar la tapa i girar l'embocadura seguint la fletxa | 3 Col·locar la càpsula i girar l'embocadura fins a la posició inicial (<i>clic</i>) | 4 Pressionar els dos botons a la vegada (perfora la càpsula) | 5 Expirar profundament | 6 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 7 Inspirar a poc a poc i profundament (càpsula vibrant) | 8 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 9 Expirar lentament | 10 Repetir del 5 al 10 (si hi ha restes de pols) | 11 Retirar la càpsula i tancar l'inhalador | 12 Glopejar aigua |


Breezhaler®

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Retirar la tapa i obrir l'embocadura | 3 Col·locar la càpsula i tancar l'embocadura (<i>clic</i>) | 4 Pressionar els dos botons a la vegada (perfora la càpsula) | 5 Expirar profundament | 6 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 7 Inspirar fort i profundament (càpsula vibrant) | 8 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 9 Expirar lentament | 10 Repetir del 5 al 10 (si la càpsula no està buida) | 11 Retirar la càpsula i tancar l'inhalador | 12 Glopejar aigua |


Easyhaler®

- | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Retirar la tapa i sacsejar l'inhalador | 3 Pressionar la part superior (<i>dos clics</i>) | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inspirar fort i profundament | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tapar l'inhalador | 10 Glopejar aigua |


Ellipta®

- | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Obrir la tapa (<i>clic</i>) | 3 Expirar profundament | 4 Col·locar els llavis a l'embocadura | 5 Inspirar fort i profundament |
| 6 Retirar l'inhalador | 7 Aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tancar l'inhalador | 10 Glopejar aigua |


Forspiro®

- | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Preparació | 1 Obrir la cambra lateral | Utilització | 1 Col·locar-se dempeus | 2 Obrir la tapa | 3 Aixecar la palanca blanca (<i>clic</i>) i retornar-la a la posició original (<i>clic</i>) | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| | 2 Tallar la tira d'alumini | | 6 Inspirar fort i profundament | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tancar la tapa | 10 Glopejar aigua |
| | 3 Tancar la cambra lateral | | | | | | |


Genuair®

- | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Retirar la tapa i mantenir l'inhalador recte (botó de color cap amunt) | 3 Prémer el botó (<i>dobte clic</i> i la finestreta quedarà verda) | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inspirar fort i profundament (<i>clic</i>) | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tapar l'inhalador | 10 Glopejar aigua |


Handihaler®

- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Obrir la tapa i l'embocadura | 3 Col·locar la càpsula i tancar l'embocadura (<i>clic</i>) | 4 Pressionar el botó (perfora la càpsula) | 5 Expirar profundament | 6 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 7 Inspirar a poc a poc però amb força (càpsula vibrant) | 8 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 9 Expirar lentament | 10 Repetir del 5 al 10 | 11 Retirar la càpsula i tancar l'inhalador | 12 Glopejar aigua |





Inhalador de cartutx pressuritzat[®]

- | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Sacsejar l'inhalador | 3 Retirar el tap | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inclinar el cap endarrere | 7 Inspirar lentament i profundament mentre es pressiona el cartutx (3-5'') | 8 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 9 Expirar lentament | 10 Glopejar aigua |



Nexthaler[®]

- | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Obrir la tapa | 3 Expirar profundament | 4 Col·locar els llavis a l'embocadura | 5 Inspirar fort i profundament |
| 6 Retirar l'inhalador | 7 Aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tancar l'inhalador | 10 Glopejar aigua |



Novolizer[®]

Preparació

- 1** Treure la tapa de la càrrega de medicament
- 2** Posar el medicament i col·locar la tapa
- 3** Treure el tap de l'embocadura (finestreta vermella)

Utilització

- | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Retirar la tapa i mantenir recte (botó de color cap amunt) | 3 Prémer el botó (<i>double clic</i> i la finestreta quedarà verda) | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inspirar fort i profundament (<i>clic</i>) | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tapar l'inhalador | 10 Glopejar aigua |



Respimat[®]

Preparació

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 Retirar la base transparent | 2 Col·locar el cartutx dins del dispositiu (<i>clic</i>) | 3 Pressionar el cartutx contra una superfície ferma | 4 Col·locar la base transparent (<i>clic</i>) | 5 Girar la base seguint les fletxes (<i>clic</i>) |
| 6 Obrir la tapa | 7 Prémer el botó i tancar la tapa | 8 Repetir del 5 al 7 fins que aparegui una boira | 9 Repetir tres vegades més del 5 al 7 | |

Utilització

- | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Girar la base seguint les fletxes (<i>clic</i>) | 3 Obrir la tapa | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inspirar lent i profund mentre es pressiona el botó | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tapar l'inhalador | 10 Glopejar aigua |



Spiromax[®]

- | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Mantenir l'inhalador en posició vertical | 3 Obrir la tapa de l'embocadura (<i>clic</i>) | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inspirar fort i profundament | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tapar l'inhalador | 10 Glopejar aigua |




Turbuhaler[®]

- | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Retirar la tapa i mantenir l'inhalador recte | 3 Girar la base cap a l'esquerra i després cap a la dreta (<i>clic</i>) | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inspirar fort i profundament | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tancar l'inhalador | 10 Glopejar aigua |



Twisthaler[®]

- | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Mantenir l'inhalador en posició horitzontal | 3 Retirar la tapa | 4 Expirar profundament | 5 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 6 Inspirar fort i profundament (<i>clic</i>) | 7 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 8 Expirar lentament | 9 Tapar l'inhalador girant la tapa cap a la dreta (<i>clic</i>) | 10 Glopejar aigua |

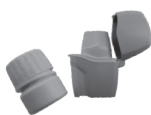

Zonda[®]

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 Col·locar-se dempeus | 2 Obrir la tapa i l'embocadura | 3 Col·locar la càpsula i tancar l'embocadura (<i>clic</i>) | 4 Pressionar el botó (perforar la càpsula) | 5 Expirar profundament | 6 Col·locar els llavis a l'embocadura |
| 7 Inspirar a poc a poc i amb força (càpsula vibrant) | 8 Retirar l'inhalador i aguantar la respiració (10'') | 9 Expirar lentament | 10 Repetir del 5 al 10 | 11 Retirar la càpsula i tancar l'inhalador | 12 Glopejar aigua |